

Wózek pielęgnacyjny stabilizujący plecy i głowę

kod NFZ: 9194.03


kod NFZ: 9194.04

Nr. wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych PL/DR 017751

JAZZ BOREAL pozwala na ciągłe utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy, przy szerokim zakresie adaptacji wymiarów do pacjenta. Kąty oparcia i siedziska można łatwo regulować niezależnie w sposób manualny. Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu SOFT zrobioną ze specjalnego materiału obiciowego (DARTEX) bardzo delikatnego dla ciała, ale wytrzymałego. Wózki głównie przeznaczone dla osób leżących, wymagających długoterminowej opieki, niestabilnych. Takie osoby nie zawsze kwalifikują się na szeroko rozumiany wózek inwalidzki, który po prostu ze względów funkcjonalnych dla takich osób nie stanowi żadnego komfortu ani bezpieczeństwa. W takich sytuacjach potrzebny jest sprzęt, który skutecznie spełni swoją rolę przede wszystkim z punktu zmiany pozycji oraz stabilizacji postawy.

Estetyka, niezawodność i funkcjonalność to idea, która przyświeca naszej fabryce przy projektowaniu. Najwyższą jakością jest wyznacznikiem stosowanych technologii do produkcji i montażu, potwierdzona przez certyfikowane instytucje w większości krajów europejskich.

JAZZ

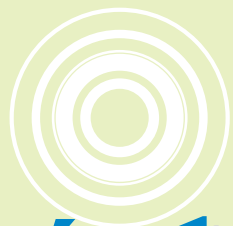

Boréal

• Regulowany zagłówek ortopedyczny.

• Tapicerka z Dartexu bardzo wygodna i komfortowa dla osoby siedzącej z głębokimi wyprofilowaniami bocznymi.
• Kąt nachylenia oparcia można regulować manualnie.

• Podłokietniki regulowane na wysokość i demontowalne,
• podparcie pod łokcie można przesuwac w poziomie -przód/tył.

Podnóżki:

• płynnie regulowane z podparciem pod tydki,
• zabezpieczenia na kolana,
• regulowany kąt nachylenia płyty,
• demontowalne,
• odchylane na zewnątrz i do wewnątrz.

• Regulowana wysokość rączek do pchania.

• Regulowana głębokość siedzenia,
• możliwość zmiany kąta siedzenia.

• Koła na szybkozłączce.



60
65
69



39
44
48



16 - 24



50 - 57
(bez poduszki)



91 - 106



50 - 60



30°



44-54



106



~30



120



t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

Wózek pielęgnacyjny stabilizujący plecy i głowę

kod NFZ: 9194.04

Nr. wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych PL/DR 017751

Osoby wysokie, dla których standardowe oparcie jest zbyt krótkie aby skutecznie podeprzeć plecy i głowę, mogą zamówić wyższe oparcie.



Boreál

Peloty boczne, ustawialne w różnych pozycjach pozwalają osobę niestabilną skutecznie podeprzeć i unieruchomić.




Wygodne wyprofilowane podparcie po łokieć.




- Poduszka siedziska wyprofilowana w sposób, który prawidłowo kształtuje miednicę i przeciwdziała wysuwaniu się z wózka.
- ściągana, mocowana na taśmach velcro co pozwala stosowanie własnych poduszek.
- podstawa poduszki umożliwia ustawienie siedziska pod innym kątem, istotne dla osób mających tendencje do wysuwania się z wózka.



Rączki do pchania są regulowane co przy odchylnym oparciu pozwala wysokiej osobie pchać wózek nie garbiąc się.

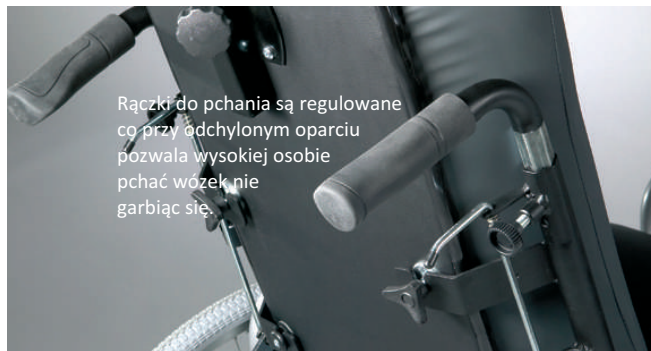

t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i

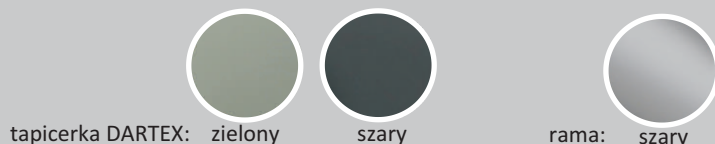

tapicerka DARTEX: zielony

szary

rama: szary