

Wózek ultralekki stabilizujący plecy i głowę

kod NFZ: 9194.04

coquille/corille -bardzo wygodne wózki wyposażone w komfortową tapicerką wykonaną z DARTEXu, typu soft . Wózek wyposażony w czteropunktowe pasy stabilizacyjne oraz zagłówek. Wszystkich regulacji dokonuje się w sposób płynny za pomocą siłowników hydraulicznych. Wózki przeznaczone dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki , niestabilnych. Bardzo funkcjonalne jako wyposażenie domów opieki i w mieszkaniach prywatnych. Osoby leżące nie zawsze kwalifikują się na szeroko rozumiany wózek inwalidzki , który po prostu ze względów funkcjonalnych dla takich osób nie stanowi żadnego komfortu ani bezpieczeństwa. Dla takich osób potrzebny jest sprzęt , który skutecznie spełni swoją rolę przede wszystkim z punktu zmiany pozycji oraz stabilizacji postawy.

Estetyka , niezawodność i funkcjonalność to idea , która przyświeca naszej fabryce przy projektowaniu . Najwyższa Jakość jest wyznacznikiem stosowanych technologii do produkcji i montażu , potwierdzona przez certyfikowane Instytuty w większości krajach Europejskich.

coquille corille



- Ściągany wyprofilowany zagłówek,
- kubekowy fotel , otapicerowany Dartexem bardzo wygodny i komfortowy dla osoby siedzącej. Wysokie podparcia pod łokcie również miękko otapicerowane od wewnątrz gwarantują maksymalną stabilizację Kąt nachylenia fotela można płynnie regulować za pomocą sprężyn hydraulicznych.
- płynnie regulowany podnóżek z miękkim , wygodnym podparciem pod łydki
- otapicerowane , miękkie zabezpieczenia na kolana,
- zmiana wysokości siedziska, istotne dla osób wysokich.



wytrzymałość 120 kg!

67	38	23 (6cm poduszka)	45.47.49	119	75	-4/36°	46	112	36	120
	40	25 (8cm poduszka)	51.52.53	121,5	77					
	42	27 (10cm poduszka)	54.55.56	124	79					
	44									
	48									
	55	23	54.55.56	124	78		50	112	37	150
	79 (XXL)									
	79 (XXL)									

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!



t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i

Wózek ultralekki stabilizujący plecy i głowę

kod NFZ: 9194.04




coquille



corille

coquille
corille

Pomiędzy **coquillem** i **corillem** jest różnica w konstrukcji podwozia, jak widać na zdjęciach powyżej. **Coquille** jest wyposażony w pięć małych kółek, cztery jezdne i piąte pośrodku tzw. kierunkowe. Taka konstrukcja ułatwia znacznie prowadzenie wózka w pomieszczeniach zamkniętych, wózek praktycznie obraca się w miejscu. **Corille** jest na podwoziu z czterema kołami, dwa przednie na widełkach o rozmiarze 6' oraz dwa tylne większe w rozmiarze 12', taki zestaw gwarantuje lepsze prowadzenie na zewnątrz np.: w parkach, ogrodach itp.

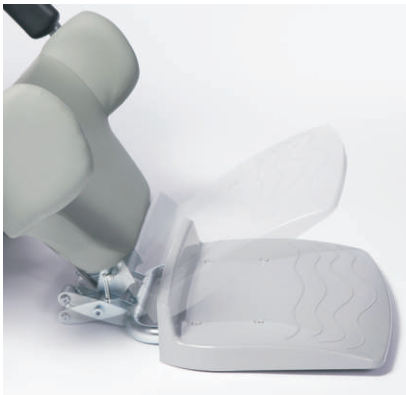

podnóżki z jedną płytą podczas z chodzenia z wózka osoba może stawać na płycie i przesiadać się na łóżko. płyta jest na mechanizmie sprężynowym



podnóżki z dwoma płytami podczas z chodzenia z wózka osoba może stawać na płycie i przesiadać się na łóżko lub podnieść płyty do góry i przesiąść się na łóżko




różne grubości poduszek siedziska w zależności od wzrostu osoby: 6cm, 8cm, 10cm.

XXXL

Wózek dla osób bardzo otyłych. Szerokość siedziska 55cm i 60 cm. Wytrzymałość 150kg.



kolor ramy:

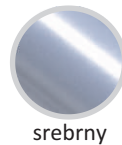


srebrny

kolory tapicerki:



fioletowy

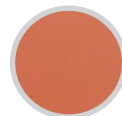

łosośowy



zielony

Stolik terapeutyczny -opcja.



Uchwyt na kroplówkę -opcja.

