

# Wózek stabilizujący głowę i plecy

kod NFZ: 9194.04

Nr. w Rejestrze Wyrobów Medycznych PL/DR017751

JAZZ30 to ultralekka wersja wózka z odchylanym oparciem do 30°. Wyposażony standardowo w zagłówek w formie wydłużonego oparcia ze specjalną barierką, pozwala to osobie wysokiej pchać wózek z odchylanym oparciem w pozycji wyprostowanej.


W standardowej wersji wyposażony jest w podnóżki z regulacją kąta nachylenia do poziomu z podparciami podudzia. Wózek posiada konstrukcję modułową, standardową wersję można rozbudowywać i modyfikować w taki sposób aby spełniała jak najlepiej oczekiwania osoby poruszającej się na wózku, które w trakcie używania mogą ulegać zmianom. Użytkownik nie musi zaopatrywać się w nowy wózek, którego koszt jest znacznie wyższy aniżeli dokupienie jedynie podzespołów, które po zamontowaniu do wózka zapewnią dalszą eksploatację, komfort i użyteczność.



Rodzaj kół do wyboru: obręcze plastikowe lub szprychowe



- Podnóżki regulowane do poziomu z podparciem na łydki, odchylane na zewnątrz i do wewnątrz,
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- ściągane przedłużenie oparcia,
- kółka odbojowe na rogach płyt podnóżków zabezpieczają przed obijaniem i rysowaniem ścian.
- koła tylne ściągane szybkozłączach

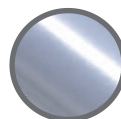

srebrny



60  
63  
65  
67  
69



39  
42  
44  
46  
48



22  
22  
22  
22  
22



50  
50  
50  
50  
50



43  
43  
43  
43  
43



min 40  
max 50



48 bez zagł.  
76 z zagł.



21



120



Osoby, które są niestabilne, prężą się, są spastyczne i mają tendencje do zsuwania się z wózka wymagają specjalnych systemów mocujących. JAZZ30 jak i pozostałe modele można doposażyć w specjalne pasy stabilizujące piersiowe, biodrowe jak również kliny, peloty, specjalne systemy siedzisk i oparc, które zabezpieczają osobę siedzącą przed wysuwaniem się ale także co bardzo istotne poprawiają i korygują postawę zapobiegając wielu deformacjom, których można nabawić się siedząc długotrwale w wózku bez tego typu pomocy.

## T30

Jazz30 może być wykonany w wersji transportowej T30 z małymi kołami tylnymi.



## HEM2

JAZZ30 może być wyposażony w system HEM2 dla osób po wylewach, po paraliżach jednostronnych. Konstrukcja wózka wyposażona jest w system napędowy z dwoma obręczami napędowymi po jednej stronie wózka. Osoba, która ma jedną stronę ciała niewładną może poruszać się wózkiem używając tylko jednej ręki. Obręcz większa jest sprzężona z kołem po stronie ręki sprawnej a mniejsza z kołem przeciwnieległym. System jest całkowicie demontowalny na szybkozłączach i można w prosty i łatwy sposób zmieniać strony napędowe. Hamulec jest również tak skonstruowany, że umożliwia zablokowanie kół jedną ręką



Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i