

Dane techniczne Navix

szerokość całkowita	szerokość siedziska	nachylenie siedziska	nachylenie oparcia	wysokość podłokietnika	wysokość siedziska	wysokość całkowita	długość całkowita	głębokość siedziska	wysokość oparcia	waga użytkownika

570	400	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	945	380-500	580	130
570	450	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	945	380-500	580	130
620	500	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	945	380-500	580	130

Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg, 1,5).

waga	baterie	silniki	prędkość	maks. dystans	maks. nachylenie najazdu	maks. nachylenie zjazdu	prześwit	promień skrętu	koła


79	2x12V 38Ah	2 x 220 W	6 km/h	20 km	9°	9°	60	1250	przodnie: pompo- wane 317,5x57,15 tyłne: Krypton 200x50
----	---------------	-----------	--------	-------	----	----	----	------	--

Klasa wózka A do użytkowania - wewn. i na zew. - Nie jest przeznaczony do użytkowania jako fotel pasażera podczas transportu.

Opcje

- Stół terapeutyczny pleksi
- Światła LED
- Kółka przeciwwyrotne
- Podnóżek z możliwością nachylenia
- Odchylenie dżojstika na bok
- Poduszki siedziska różnej grubości
- Różne rodzaje siedzisk/oparc
- Peloty boczne
- Zagłówek
- Automatycznie regulowany kąt nachylenia podnóżków
- Automatycznie regulowany kąt nachylenia oparcia / siedziska
- Dżojstik z regulacją wysokości
- Winda siedziska

Kolory

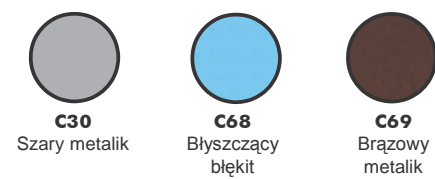

* Dodatkowe kolory na życzenie

Dodatkowe opcje: LIFT

Możliwość podniesienia siedziska o maks. 30 cm, co poprawia KONTAKTY Z LUDŹMI

Nowy wózek Forest Lift umożliwia nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, zwiększając mobilność i ułatwiając społeczną integrację.

Możliwość podniesienia siedziska o maks. 30 cm ułatwia DOSTĘP

- szafki kuchenne
- bankomaty
- lokale gastronomiczne
- itd.



Information for the visually impaired is available upon request. - R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgia - 12/2011



Lepsza zwrotność z kompaktowym napędem na przednie koła



- Lepsze pokonywanie przeszkód
- Mniejszy kąt skręcania
- Ułatwiony transfer użytkownika
- Kompaktowe wymiary - zmieści się w małym samochodzie
- Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb



model na zdjęciu stanowi tylko ilustrację

Vermeiren Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Tel: 00 48 71 387 42 00
Fax: 00 48 71 387 05 74

info@vermeiren.pl - www.vermeiren.pl



VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości

Zmiany techniczne zastrzeżone



Tworzymy nowe możliwości




Lepsza zwrotność uzyskana dzięki kompaktowemu napędowi na przednie koła.

Wózek inwalidzki Navix umożliwia wykonywanie ostrych skrętów w pomieszczeniach i ułatwia pokonywanie przeszkód, takich jak progi np. w pobliskim sklepie spożywczym.

Navix jest przyjazny dla użytkownika, umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb, ponadto ułatwia transfer użytkownika na łóżko, do samochodu, korzystanie z toalety itd.

Navix zwiększa mobilność użytkownika, gdyż pojazd o tak małych rozmiarach zmieści się nawet w niewielkim samochodzie.

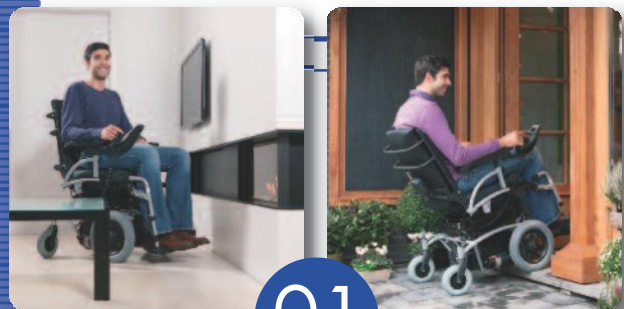

01

Lepsza zwrotność z napędem na przednie koła


- Mniejszy kąt skręcania
- lepsze pokonywanie przeszkód

“Dzięki wózkowi Navix poruszanie się po domu stało się o wiele łatwiejsze.”

Compact

- Łatwość przewożenia: zmieści się w małym samochodzie
- Łatwość (de)montażu
- Całkowita szerokość wózka Navix została ograniczona do 570 mm.



02

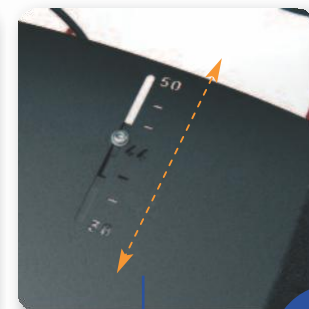

03

Łatwość obsługi

- Nachylenie siedziska/oparcia
- Regulacja głębokości siedziska
- Elementy podnóżka, które wskazują całkowitą szerokość wózka
- Ułatwiony transfer użytkownika
- Zmiana wysokości siedziska
- Regulacja wysokości / podłokietników / możliwość rozszerzania na boki
- Zmiana położenia dżojstika (odchylenie na bok, aby umożliwić łatwiejszy dostęp do stołu - rozwiązanie opcjonalne)

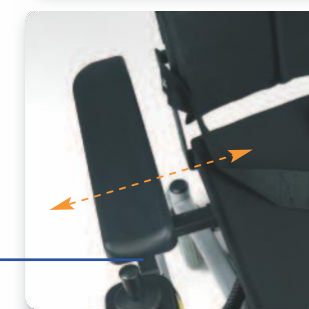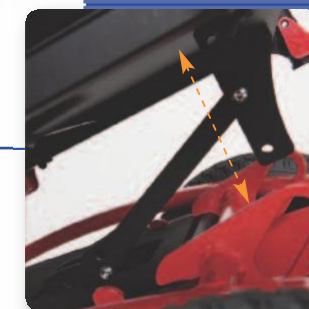

04

Możliwość użytkowania na zewnątrz

- 60 mm prześwitu pod wózkiem
- Duże z bieżnikiem przednie koła zapewniające lepszą przyczepność podczas jazdy na zewnątrz

