

# RAPIDO

**RAPIDO** to wózek łączący w sobie komfort i elastyczność. Przeznaczony do poruszania się zarówno w pomieszczeniach jak i w mieście. Bezobsługowe baterie można w łatwo demontować. Wyposażony w bardzo czułą jednostkę sterującą nowego typu, która zapewnia doskonałe manewrowanie. Wyprofilowana tapicerka zapewnia wysoki komfort.

**All-in-one :komfort, technologia, jakość, wytrzymałość.**

Standardowe wyposażenie:


- podłokietniki regulowane w pionie i poziomie,
- baterie w dwóch oddzielnych obudowach,
- system zmiany szerokości pola siedzenia,
- regulowany manualnie kąt oparcia,
- regulowany manualnie kąt siedziska.
- odchylany na pantografie dżojstik,
- tapicerka CORDURA®



C27

C25

Kolory ram

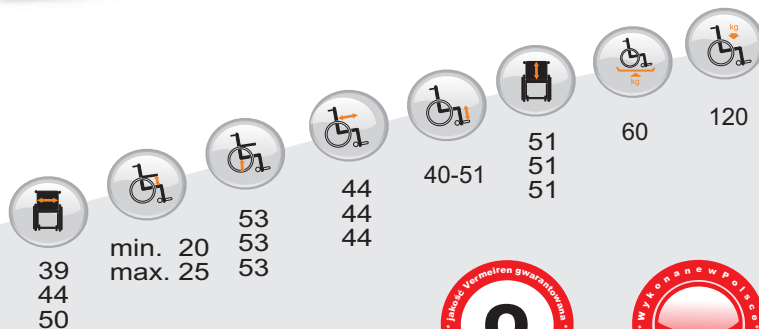

t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i

# RAPIDO




Konstrukcja wózka umożliwia łatwy i szybki sposób demontażu poszczególnych części i złożenie. Nawet małe auto nie stanowi problemu jeżeli chodzi o przestrzeń ładunkową. Wózek podróżuje razem z właścicielem.

Każda bateria jest umieszczona w oddzielnej obudowie z uchwytem, co bardzo ułatwia wyciąganie baterii i wsadzanie np. do bagażnika auta. Każda obudowa jest wyposażona w zintegrowaną wtyczkę i gniazdo (nie jest konieczne rozkręcanie przewodów).

Do wykonania tapicerki wykorzystaliśmy materiał CORDURA®. Jest to techniczna tkanina wysokogatunkowa, bardzo mocna i wytrzymała na otarcia. Poliamid pokryty powłoką poliuretanową z apreturą Teflonu®, nieprzepuszczającą wody. Cordura jest rejestrowaną chronioną marką firmy DuPont® jako odporny na uszkodzenia materiał. Wykorzystywany do produkcji odzieży (do sportów ekstremalnych) i w wojsku. Dla osób, które potrzebują inne materiały mamy skaj oraz soft.

Wózek głównie przeznaczony do używania wewnątrz pomieszczeń, ale dzięki mocnej jednostce napędowej (200 W) można go z powodzeniem używać również na zewnątrz. Dla osób wymagających specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych odpowiadającym ich fizycznej kondycji, mamy wiele propozycji opcjonalnych, które ułatwią używanie, ale również zagwarantują wysoki komfort. Proszę skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat opcji dodatkowych lub odwiedzić naszą stronę [www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)

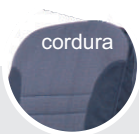

Tapicerka



2x12V/44Ah  
żelowe



2x200W



6 km/h



30 km



10°(17%)



4 cm



140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmniejszyć znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie, bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.



t w o r z y m y

n o w e

m o ż l i w o ś c i