

# TRACER kids

**Doskonały wózek do poruszania się w terenie.**

Wózek wykonany zgodnie z najwyższymi normami co jest potwierdzone certyfikatami wydanymi przez jednostki certyfikacyjne w większości krajów europejskich. Nowa generacja silników 350W umożliwia płynną jazdę bez żadnych kłopotów. Bezobstugowe baterie dostarczają wystarczającą ilość energii do pokonania w optymalnych warunkach odległości 35 km.



Zawsze komfort. Ortopedyczne siedzisko oraz oparcie zawsze gwarantują dużą wygodę siedzenia. Dodatkowym atutem jest opcjonalna możliwość regulowania kąta nachylenia siedziska, oparcia oraz podnóżków. Wózek w standardzie wyposażony w oświetlenie tylne i przednie. Rozsuwane podłokietniki sprawiają, że w zimie i jesienią, kiedy trzeba ciepłej ubrać się, nie będzie za ciasno.




Kolory ram

37 39	17-25	54	35-39	27-38	50	93	125	



t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i

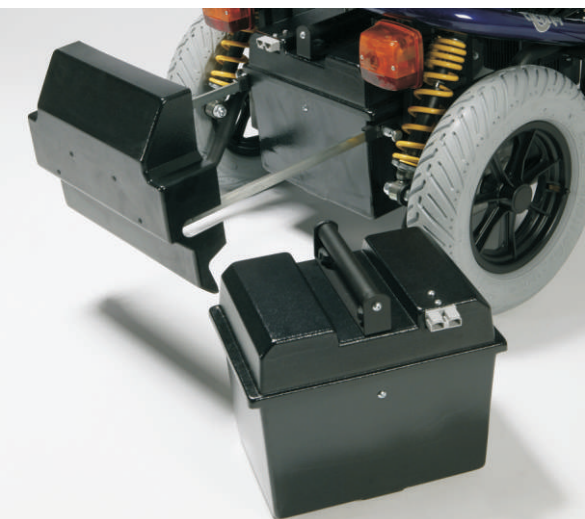

Baterie w dwóch oddzielnych obudowach dają się w łatwy sposób zdemontować.

Zawieszenie tylne na amortyzatorach poprawia w znaczny sposób komfort jazdy.



Nowoczesna jednostka sterująca Dx2 z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Umożliwia rozbudowę systemu o specjalistyczne elementy umożliwiające sterowanie dodatkowymi siłownikami oraz wysoce specjalistyczne systemy sterujące. Pozwala na opcjonalnie wykorzystanie dżojstika jako myszy komputerowej - unikatowe rozwiązanie, które dla dzieci, które mają olbrzymie kłopoty z uchwyceniem i manipulacją myszą jest nie do przecenienia.




Oświetlenie tylne i przednie sprawia, że po zmroku wózek jest widoczny.

Dla osób wymagających specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych odpowiadającym ich fizycznej kondycji mamy wiele rozwiązań opcjonalnych, które ułatwią używanie, ale również zagwarantują wysoki komfort. Proszę skontaktować się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat opcji dodatkowych lub odwiedzić naszą stronę [www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)



soft

Tapicerka

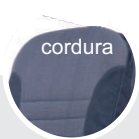

cordura



skaj



2x12V/80Ah  
żelowe



2x200W  
2x350W



6 km/h  
10 km/h



35 km



10°(17%)



7 cm



140 cm

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmniejszyć znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie, bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

